

ISA™

Laveur désinfecteur d'endoscope



DUOMED

Duomed Swiss AG
Grenzstrasse 5a, 6214 Schenkon
Tel. +41 (0)41 510 07 00
www.duomed.com

Retraitement



CANTEL

LE LAVEUR ISA™ LA (R)ÉVOLUTION NÉCESSAIRE

Depuis plus de 20 ans, Medivators se consacre au développement et à la fourniture de solutions innovantes dans le domaine de la prévention et du contrôle des infections dans le monde entier.

Le Laveur Désinfecteur ISA™ est la solution Cantel pour un nettoyage et une désinfection rapide, efficace et maîtrisée de vos endoscopes flexibles, conçue pour les unités d'endoscopie exigeant la technologie la plus avancée.

Conçu pour être conforme à la norme UNI EN ISO 14937, le reprocesseur d'endoscope ISA™ assure une stérilisation chimique à froid avec un niveau d'assurance de stérilité 10-6.

Le Laveur Désinfecteur ISA™ assure:

- Haute normes de qualité pour l'opérateur, les endoscopes et les patients.
- Réduction des coûts liés aux infections hospitalières



LE CERCLE COMPLET DE PROTECTION PROTECTION

En tant que chef de file mondial en matière de prévention des infections, seul Cantel offre le Cercle complet de protection, un partenariat proactif à valeur ajoutée qui vise à vous aider à éliminer les risques, à rationaliser l'efficacité opérationnelle et à optimiser votre réussite.

RETRAITEMENT La désinfection de haut niveau est une exigence de prévention des infections en endoscopie. Les technologies de retraitement de Cantel sont conçues pour respecter les normes de désinfection de haut niveau en vigueur. Elles optimisent le flux de travail grâce à leur interface utilisateur, ergonomie et prise en charge d'une vaste gamme d'appareils.

Laveur désinfecteur d'endoscopes ISA™

La solution de Cantel rapide et flexible

FONCTIONNEMENT SIMPLE, RAPIDE ET OPTIMISÉ

- Cycle stérilisation complet dans 19 minutes avec surveillance de canaux
- Cycle stérilisation et nettoyage complet dans 25 minutes avec surveillance de canaux
- Cycle désinfection et nettoyage complet dans 20 minutes avec surveillance de canaux
- Simple et facile à utiliser
- Insertion des endoscopes et information sur le fonctionnement via le système RFID - permet d'éviter les erreurs et de gagner du temps




CONCEPTION COMPACTE ET ERGONOMIQUE POUR LA CONFORT DE L'UTILISATEUR

- Une grande cuve facile à charger accueille la plupart des marques d'endoscopes flexibles
- L'interface intuitive garantit un accès aisé et rapide à toutes les informations sur le cycle
- Sa taille compacte permet une installation, un fonctionnement et une maintenance aisés



SÉCURITÉ GARANTIE POUR LES OPÉRATEURS, PATIENTS ET ENDOSCOPES

- Opération mains libres et technologie basée RFID pour une prévention des contaminations croisées
- Traçabilité grâce à l'enregistrement imprimé et électronique des données du cycle
- Processus validé, conforme aux normes UNI EN ISO 15883-1/4 et UNI EN ISO/TS 15883-5 (autrichien, allemand, français: sol d'essai)

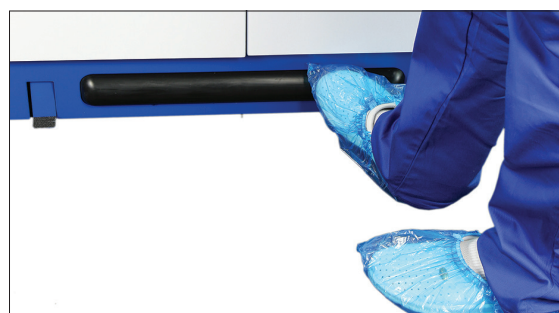


LA FORMULE POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL

- Des produits chimiques efficaces à température ambiante et compatibles avec la grande majorité des endoscopes
- Consommation optimisée de l'eau et des produits chimiques
- Spécialement élaborée en vue d'une utilisation avec le laveur désinfecteur ISA™ (UNI EN ISO 14937)



CARACTÉRISTIQUES DU LAVEUR-DÉSINFECTEUR POUR ENDOSCOPES ISA™

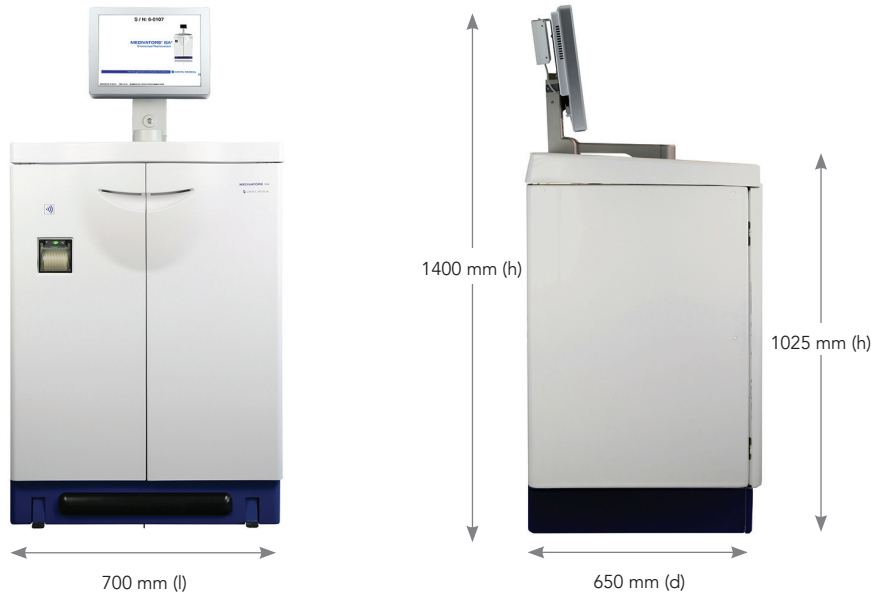

Dimensions

700 mm (l) x 1400 mm (h) x 650 mm (d) - écran inclus

Poids

75 kg

Besoins en électricité

100 V-240 V, 50-60Hz

Température ambiante de fonctionnement

5° - 40° C

Humidité

20 - 80%

Temps de retraitement

env. 22 minutes (cycle désinfection complet)

16 minutes (désinfection rapide)*

*Temps dépendant des paramètres individuels du processus, par exemple la qualité de l'eau, la chimie, etc

Capacité de traitement

1 endoscope par cycle

Désinfection/stérilisant de haut niveau

ISASPOR™ Single-shot Désinfectant / stérilisant, en deux parties acide peracétique et ISAZONE™ Activator.

Détergent

ISACLEAN™ Détergent, détergent multienzymatique

LISTE DES RÉFÉRENCES D'ARTICLES RELATIVES AU LAVEUR DÉSINFECTEUR ISA™

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
500187	ISASPOR™ Désinfectant / Stérilisant à Injection Unique de Haut Niveau	1 x 10L Sol. A+B
500188	ISASPOR™ Désinfectant / Stérilisant à Injection Unique de Haut Niveau	1 x 5L Sol. A+B
500189	ISACLEAN™ Détergent	2 x 5L
500019	ISACLEAN™ Détergent	1L
93250-222	Kit de filtres CPC ISA™	0,45µm + 0,1µm
ISAF01REV.1	ISA™ filtres d'eau	0,1µm
ISAF045REV.1	ISA™ filtres d'eau	0,45µm
ISA4400	ISA™ filtres à air	1
ISAROTS2	Rouleau de papier d'imprimante laveur désinfecteur ISA™	1

ISA™, ISASPOR™, ISAZONE™ et ISACLEAN™ sont des marques déposées de Cantel Medical (Italy)
 © 2017-2021 Cantel. Tous droits réservés. Le Cercle Complet de Protection est une marque commerciale détenue par Cantel Medical et protégée par les droits d'auteur enregistrés aux États-Unis et par des traités internationaux dans les autres pays et il appartient à Cantel Medical Corp.

www.cantelmedical.eu

Medivators BV | t: +31 (0)45 547 1471 | e: csdistributors@medivators.com

© 2021 Cantel Medical Corp. LIT-00398/A-FRCH

