

SmartBand® Ligatursystem für Varizen

Ligatursystem zur Ligation von Ösophagusvarizen,
SmartBand



Speziell entwickelt, um die Ligationleistung zu verbessern

Das SmartBand® Multiband-Ligatursystem eignet sich zur wirksamen Behandlung von Blutungen bei Ösophagusvarizen und anorektalen Hämorrhoiden. Die überarbeitete Rezeptur der Ligaturringen sorgt für einen verbesserten Halt. Das Ligation-Kit besteht aus einem Ligationgriff mit

Universalanschluss, Ladevorrichtung, Spülanschluss, Pentax-Adapter und Zylinder mit 6 Bändern (mit und ohne Latex). Die Ligaturbänder entfalten ihre volle Haltekraft bei Körpertemperatur. Sie bleiben bis zu 24 Monate zu 100% elastisch und gewährleisten eine effektive Ligation.





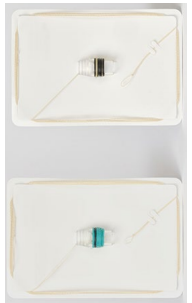

SmartBand®
Multi-Band Ligation System



Ligatursystem für Ösophagusvarizen, **SmartBand**

ø Arbeitskanal 2,8 mm



| | Produktnummer | Merkmale | ø distale Endoskopspitze | Kompatibilität | VE |
|---|------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|----|
|  | SLK-6 mit Latex / Schwarz | SmartBand® Ligator Kit beinhaltet: Handgriff, Ladevorrichtung, Verbindungsrohr und Zylinder mit 6 Bändern inkl. Adapter Pentax Endoskope SLK-P  | 8,6 - 11,6 mm | Fujifilm Olympus Pentax | 1 |
| | SLK-6-LF Latexfrei / Grün | SmartBand® Ligator Kit beinhaltet: Handgriff, Ladevorrichtung, Verbindungsrohr und Zylinder mit 6 Bändern inkl. Adapter Pentax Endoskope SLK-P | 8,6 - 11,6 mm | Fujifilm Olympus Pentax | 1 |
|  | SLP-6 mit Latex / Schwarz | SmartBand® Ersatzligatoren fertig vorgeladen inkl. Auslöseschnur und 6 Bändern, Haltbarkeit 24 Monate  | 8,6 - 11,6 mm | Fujifilm Olympus Pentax | 1 |
| | SLP-6-LF Latexfrei / Grün | SmartBand® Ersatzligatoren fertig vorgeladen inkl. Auslöseschnur und 6 Bändern, Haltbarkeit 24 Monate | 8,6 - 11,6 mm | Fujifilm Olympus Pentax | 1 |

Maximale Haltekraft

Einfache Montage und Handhabung
Geeignet für Endoskope mit ø 8,6 - 11,6 mm
Vorgeladen für 6 Ligaturen
Ersatzligatoren, falls mehr als als 6 Bänder notwendig
Ligaturbänder mit Latex und latexfrei
Standardadapter für Pentax inklusive

