



DUOMED
by Palex

Endoskopische Hämoclips
Sicherheit | Griffigkeit | Belastbarkeit

COBRA CLIP

ENDOSCOPIC HEMOCLIPS

SECURE / GRIP / RESILIENCE



Der CobraClip ist die neueste Innovation in der endoskopischen Hämostase. Dieser einteilige, lasergeschnittene Hämoclip bietet dank seiner superelastischen Struktur eine hohe Verschlusskraft.



www.duomed.com

Einteiliger Clip mit elastischer Struktur

Starke Verschlusskraft, angepasst an das Zielgewebe

Rutschfeste Backenenden

Hervorragende Griffbarkeit bei der Gewebemobilisierung

Ergonomischer Griff


Präzise Öffnungs- & Verschlusssteuerung für effizientes Auslösemanagement. Sicherheitsverriegelung rastet nach Auslösung ein

1:1 Rotation

Intuitive Handhabung, während die Hand am Griff bleibt

Flexibles Katheterende

Zuverlässige Verschluss- und Drehleistung, auch unter schwierigen Bedingungen

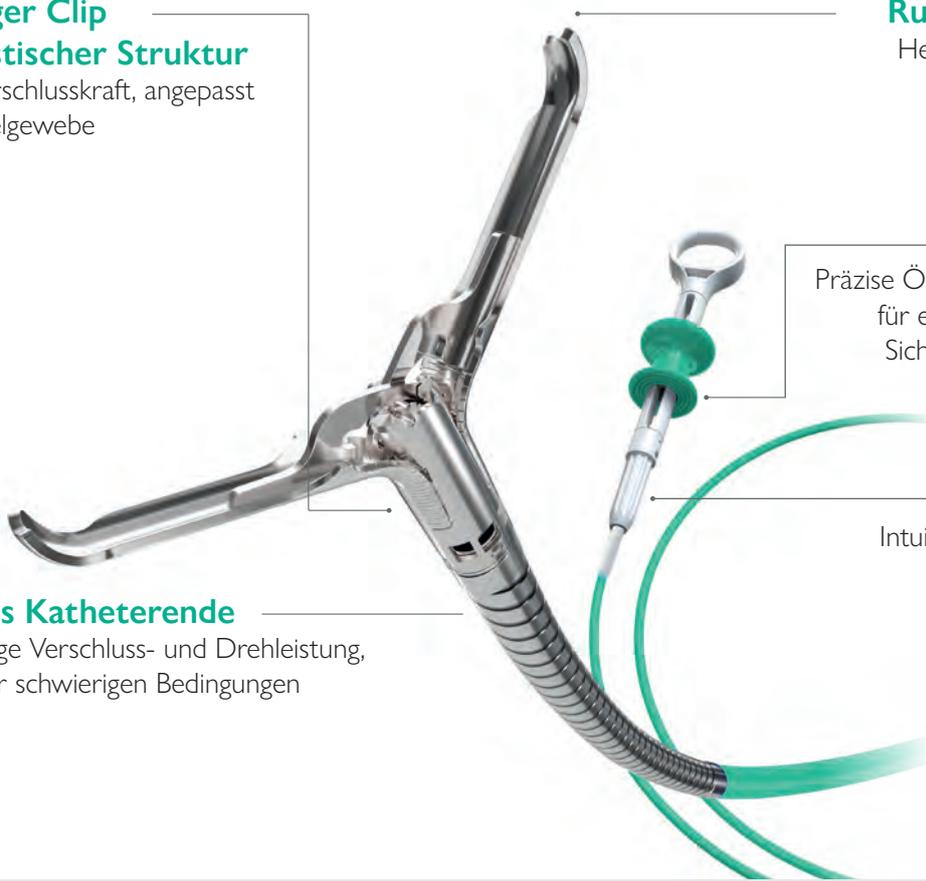

Integraler Farbcode

Schnelle Erkennung der Hämoclip Öffnungsweite



Produktnummer	Hämoclip		Katheter		Farbcode	Verkaufseinheit
	Öffnungsweite	Clip-Winkel	Ø	Länge		
VTL/HC09-135-23-235	9 mm	135°	2.3 mm	235 cm		10
VTL/HC11-135-23-235	11 mm	135°	2.3 mm	235 cm		10
VTL/HC13-135-23-235	13 mm	135°	2.3 mm	235 cm		10
VTL/HC16-90-23-235	16 mm	90°	2.3 mm	235 cm		10

