



DUOMED  
by Paalex

Clips hémostatiques  
Sécurité | Adhérence | Résistance

# COBRA CLIP

ENDOSCOPIC HEMOCLIPS

SECURE / GRIP / RESILIENCE



Le CobraClip est la dernière innovation en matière d'hémostase endoscopique. Cet hémosticlip monobloc découpé au laser offre une force de fermeture élevée grâce à sa structure superélastique.



VYTIL

[www.duomed.com](http://www.duomed.com)

### Clip monobloc à structure élastique

Excellente force de fermeture, s'adapte aux tissus ciblés

### Découpe des mors anti-glisse

Bonne accroche des tissus lors de leur rapprochement

### Poignée ergonomique

Contrôle d'ouverture et fermeture pour une bonne maîtrise du largage  
Blocage de sécurité après le largage

### Rotation 1:1

Manipulation instinctive tout en maintenant la main sur la poignée


### Cathéter à extrémité flexible

Maintient les performances de fermeture et de rotation lors de l'utilisation sous contrainte



### Code couleur intégral

Identification immédiate de la largeur d'ouverture en situation d'urgence

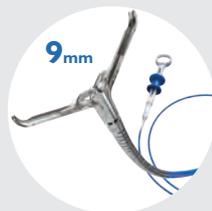

Référence	Clip hémostatique		Cathéter		Code couleur	Unité de vente
	Ouverture maximale	Angle des mors	Ø	Longueur		
VTL/HC09-135-23-235	9 mm	135°	2.3 mm	235 cm		10
VTL/HC11-135-23-235	11 mm	135°	2.3 mm	235 cm		10
VTL/HC13-135-23-235	13 mm	135°	2.3 mm	235 cm		10
VTL/HC16-90-23-235	16 mm	90°	2.3 mm	235 cm		10

