



CLEVAER PCS 10G

SYSTÈME DE PRÉLAVAGE AUTOMATIQUE



CLEVAER PCS 10G

SYSTÈME DE PRÉLAVAGE AUTOMATIQUE



PRÉ-NETTOYAGE FIABLE ET EFFICACE POUR LES ENDOSCOPES FLEXIBLES

CLEVAER PCS 10G : une solution automatisée et intelligente pour optimiser la première étape critique du reconditionnement des endoscopes. Développé à l'aide de technologies de pointe et d'une connaissance approfondie dans le domaine de la prévention des infections, il garantit la sécurité des patients, la conformité aux réglementations et l'efficacité opérationnelle à chaque cycle.

Le CLEVAER PCS 10G automatise ce processus fondamental de la phase de pré-nettoyage du retraitement, en standardisant le dosage du détergent, les tests d'étanchéité et la traçabilité, afin que les professionnels de santé puissent compter sur des résultats cohérents, sûrs et reproductibles.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Compatibilité universelle

Connecteurs adaptables pour une utilisation avec des laveurs-désinfecteurs d'endoscopes standard, garantissant une intégration sans nécessiter de nouveaux accessoires.



Dosage automatique du détergent

La technologie de la pompe péristaltique garantit un dosage précis du détergent sans utilisation des mains.



Tuyaux autoclavables

Tous les tuyaux en contact avec les fluides sont amovibles et autoclavables pour une hygiène maximale et une stérilisation facile.



Flexibilité du détergent

Aucun produit propriétaire n'est requis, ce qui vous donne la liberté de choix et réduit les coûts d'exploitation.



Traçabilité numérique complète

Les fonctionnalités comprennent une imprimante intégrée, un port USB, un port Ethernet et un lecteur de codes-barres/RFID qui garantissent une documentation complète du cycle et la conformité.



Système de test d'étanchéité

Effectue un test d'étanchéité continu tout au long du cycle de prélavage afin de préserver l'intégrité de l'instrument.



Programmes personnalisables

Jusqu'à 3 cycles de pré-nettoyage programmables, avec rinçage interne optionnel des tuyaux pour une plus grande flexibilité.



Écran tactile couleur 7 pouces

L'interface intuitive permet un accès rapide aux paramètres, à la progression du cycle et aux alertes.



Logique de contrôle automatisée

Un système intelligent supervise toutes les fonctions en temps réel, réduisant ainsi les erreurs humaines et garantissant l'intégrité du processus.



Système d'alarme visuel et sonore

Des alertes immédiates informent les utilisateurs des dysfonctionnements, favorisant ainsi la sécurité et la maintenance proactive.

Pourquoi choisir CLEVAER PCS 10G ?

Il permet aux établissements médicaux d'améliorer l'aspect le plus critique et souvent négligé de l'hygiène endoscopique. Avec le PCS 10G, vous bénéficierez des avantages suivants :

Sécurité accrue pour les patients



Une plus grande cohérence et
fiabilité accrues



Réduction de la
charge de travail manuel




Traçabilité complète et
conformité réglementaire



Durée de vie prolongée des
équipements



CLEVAER PCS 10G offre une solution complète et intégrée pour le reconditionnement hygiénique et traçable des endoscopes haute performance.

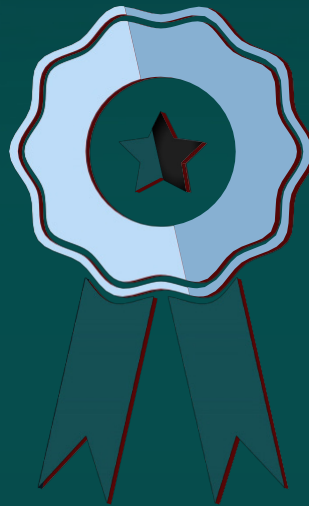

CERTIFICATIONS DE CONFORMITÉ

Le CLEVAER PCS 10G satisfait et dépasse les normes internationales en matière de sécurité et de performances, notamment :

- [DISPOSITIF MÉDICAL Classe I selon MDR 2017/745, marqué CE.](#)
- [UNI CEI EN ISO 13485:2016](#) - Gestion de la qualité pour les dispositifs médicaux.
- [UNI CEI EN ISO 14971:2022](#) - Gestion des risques pour les dispositifs médicaux.
- [EN 61326-1:2023](#) - Compatibilité électromagnétique pour les appareils de mesure et de laboratoire.
- [UNI CEI EN 61010-1:2021](#) - Exigences de sécurité pour les équipements électriques.
- [CEI EN 61010-2-040: 2022](#) - Exigences particulières pour les stérilisateurs et les appareils de lavage et de désinfection utilisés pour le traitement des matériaux médicaux.



Distributed by



DUOMED
by Palex

T + 41 (0)41 510 07 00 • info.ch@duomed.com

www.duomed.com •  Duomed Swiss AG